


培养箱界面

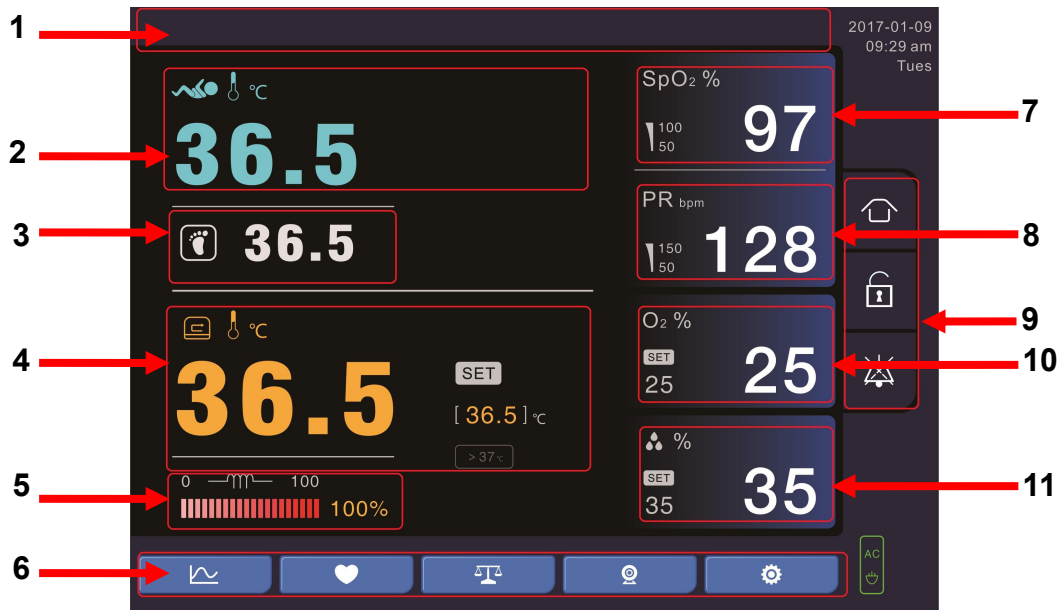

1)、报警信息显示区

7)、血氧信息显示区

2)、肤温信息显示区

8)、脉率信息显示区

3)、肤温 2 信息显示区

9)、分别为返回主界面、解锁、声音暂停按键

4)、箱温信息显示区


10)、氧浓度信息显示区

5)、培养箱加热比例指示区

11)、湿度信息显示区

6)、分别为曲线、血氧、称重、视频、系统设置按键

保暖台界面

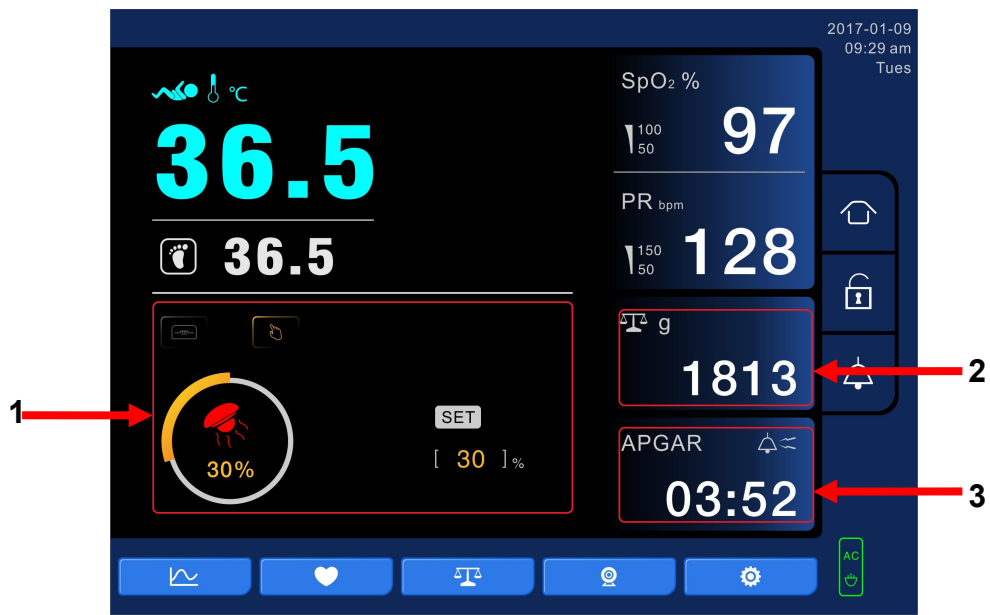

1)、预热、手控模式信息显示区


3)、评分计时信息显示区

2)、称重信息显示区

1、启动

1. 将电源开关至于“开”位置。
2. 将控制仪开关至于“开位置”，显示器会点亮，并开始自检产品是否故障。
3. 将箱篷上升或下降为培养箱或保暖台工作模式。
4. 触摸键盘锁键，可以解锁界面操作；在界面解锁状态下，触摸任意信息显示区后可对各功能进行设置；触摸声音暂停按键，可以暂停当前报警音。

2、培养箱使用方法

1. 如果需要使用箱温模式，可以使用系统设置界面中的舒适区域（）来计算适当的温度，触摸箱温信息显示区，用向上或向下选择设置温度，按“>37℃”可以调节至 37℃ 以上，设置完后点击“OK”保存设置并退出。

2. 如果需要使用肤温模式，请先将皮肤温度传感器安装到产品和婴儿上，触摸肤温信息显示区，用向上或向下选择设置温度，按“>37℃”可以调节至 37℃ 以上，设置完后点击“OK”保存设置并退出。

2、保暖台使用方法

1. 如果需要使用预热模式，触摸预热、手控模式信息显示区，选择预热模式，点击“OK”保存设置并退出。

2. 如果需要使用手控模式，触摸预热、手控模式信息显示区，用向上或向下选择设置%加热功率，设置完后点击“OK”保存设置并退出。

3. 如果需要使用肤温模式，请先将皮肤温度传感器安装到产品和婴儿上，触摸肤温信息显示区，用向上或向下选择设置温度，按“>37℃”可以调节至 37℃ 以上，设置完后点击“OK”保存设置并退出。

3、血氧功能使用方法

1. 请先讲血氧探头安装到产品和婴儿上，触摸血氧信息显示区和脉率信息显示区，通过上、下限按键和向上、向下来设置报警范围，设置完后点击“OK”保存设置并退出。


2. 点击“ON”和“OFF”可以打开或关闭该功能

4、氧浓度功能使用方法

1. 触摸氧浓度信息显示区，通过向上或向下选择设置湿度，设置完后点击

“OK” 保存设置并退出。

2. 点击 “ON” 和 “OFF” 可以打开或关闭该功能


3. 触摸 “” 可以对血氧的灵敏度、平均化时间、FastSAT 进行设置，也可以查看血氧容积波等曲线。

5、湿度功能使用方法

1. 触摸湿度信息显示区，通过向上或向下选择设置湿度，设置完后点击 “OK” 保存设置并退出。

2. 点击 “ON” 和 “OFF” 可以打开或关闭该功能

6、称重功能使用方法

1. 触摸 “” 可以进入称重设置界面，可以查看当前婴儿重量和曲线。

2. 点击置零后，有 10 秒钟的时间将婴儿抬起，等置零完成后，再将婴儿放回培养箱，可以得到婴儿的当前体重。

7、计时功能使用方法

1. 在锁屏状态下，触摸评分计时信息显示区，可以直接开启和关闭当前的计时方式。

2. 在未锁屏状态下，触摸评分计时信息显示区，可以选择 “APGAR” 和 “CPR” 两种计时方式。